

עקרון

בדיקת הסמים של חברת DIALAB היא בדיקה מהירה ספציפית ביותר לגילוי של THC - קנביס, מריחואנה

בדיקת הסמים היא שיטת בדיקה מוכחת, המשמשת במעבדות רבות ברחבי העולם. גבולות הגילוי של הבדיקה עומדים בתקנים בינלאומיים.

באמצעות בדיקה זו תוכלו לגלות נוכחות של THC בשתן. בגלל רגישותה הגבוהה של הבדיקה, הנמצאת בטווח של ננוגרמים, בפועל הבדיקה תצליח לגלות כל כמות נצרכת של סמים.

בדיקת הסמים אינה מהווה סכנה למשתמש בשימוש נכון. אנא עקבו אחר הוראות השימוש של הבדיקה בעת ביצוע הבדיקה, היו מודעים לעובדה שדוגמאות השתן הנבדקות עלולות להכיל חומרים מדבקים. בעת בדיקת חומרים בלתי ידועים ייתכן והחומר הנבדק יכלול חומרים המזיקים לבריאות.

לבטיחותכם אנו ממליצים

- קראו את כל המידע בעלון זה לפני ביצוע הבדיקה
- הרחיקו מהישג ידם של ילדים.
- אין לאכול, לשתות או לעשן בעת ביצוע הבדיקה.
- אין להשתמש בבדיקה לאחר תאריך תפוגה.
- אין לפתוח את שקית הבדיקה לפני שאתם מוכנים להתחיל בבדיקה.
- אין להשתמש בשימוש חוזר באף מרכיב של הבדיקה.
- את מרכיבי הבדיקה המשומשים יש להשליכם לפח.
- אחסנו במקום יבש בטמפרטורה של 2-30°C או 36-86°F אין להקפיא.
- אין להשתמש בבדיקה אם השקית קרועה או פגומה.
- לשימוש חיצוני בלבד.
- לאחר ביצוע הבדיקה נקו היטב כל נקודה, אשר באה במגע עם החומר הנבדק (ואת כפות הידיים).

סיכום והסבר

מריחואנה - THC, קנביס, חשיש, גראס

המריחואנה מופקת מתפרחת צמח הקנביס, העישון הוא דרך הצריכה העיקרית. הדבר עלול לגרום להתמכרות קלה, הסימפטומים, הנמשכים 2 - 4 שעות, הכוללים חוסר התמצאות, סחרחורת ופסיכודה. פרק הזמן המאפשר גילוי מריחואנה בשתן הוא 1 - 14 ימים (במשתמשים כרוניים: עד ל-80 יום).

אחסון ויציבות

יש לאחסן את בדיקת הסמים DIAQUICK בטמפרטורה של 2-30°C בשקית האטומה המקורית. תאריך התפוגה הרשום נקבע בתנאי מעבדה נומליים. ניתן לאחסן את הערכה בטמפרטורת החדר או בקירור (2-30°C). מקלון הבדיקה יציב עד לתאריך התפוגה המודפס על השקית האטומה. יש לשמור את מקלון הבדיקה בשקית האטומה עד לשימוש. אין להקפיא. אין להשתמש לאחר תאריך התפוגה.

איסוף הדגימות והכנתן

יש לאסוף את דגימת השתן במיכל נקי ויבש. ניתן להשתמש בשתן שנאסף בכל שלל ביום.

אחסון הדגימות

ניתן לאחסן את דגימות השתן בטמפרטורה של 2-8°C עד 48 שעות לפני ביצוע הבדיקה.

חומרים מסופקים

- מקלון בדיקה.
- עלון מידע.

חומרים נדרשים שאינם מסופקים

- מיכל לאיסוף שתן (יבש ונקי).
- שעון למדידת זמן.

הוראות שימוש

לפני ביצוע הבדיקה אפשרו למקלון הבדיקה ולדגימת השתן להגיע לטמפרטורת החדר (15-30°C).


• הביאו את השקית לטמפרטורת החדר לפני פתיחתה. הוציאו את מקלון הבדיקה מהשקית האטומה, והשתמשו בו מוקדם ככל האפשר.

• טבלו את מקלון הבדיקה אנכית בדגימת השתן למשך 10-15 שניות, כאשר החיצים פונים לעבר דגימת השתן. אין לאפשר מגע בין דגימת השתן לאזור קריאת התוצאה בעת טבילת הבדיקה בדגימת השתן. הימנעו מטבילת המקלון עמוק יותר מהסימן "אגוז" המצוין עליו, והימנעו מכל מגע בין דגימת השתן לאזור התוצאה.

• הניחו את מקלון הבדיקה על משטח ישר, התחילו במדידת הזמן

והמתינו להופעת קו(ים) אדום(ים). קראו את התוצאות לאחר 5 דקות. אין לפרש תוצאות לאחר שעברו 10 דקות.

פירוש התוצאות

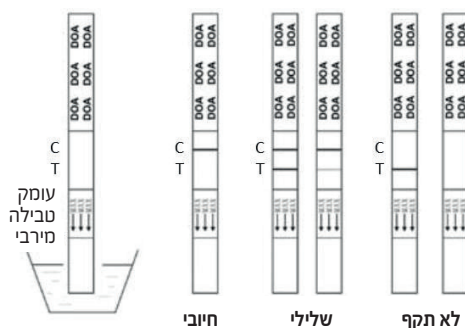

שלילי: קו צבעוני באזור הביקורת (C) וקו צבעוני באזור הבדיקה (T) עבור THC, תוצאה שלילית. הדבר מצוין שריכוז הסם בדגימת השתן נמוך מרמת הסף המוגדרת לסם ספציפי זה.

* הערה: גוון הצבע באזור הבדיקה (T) עשוי להשתנות, אולם התוצאה תיחשב לשלילית אפילו אם יש קו ורוד חלש.

חיובי: קו צבעוני באזור הביקורת (C) וללא קו צבעוני באזור הבדיקה (T) עבור THC מציינים תוצאה חיובית. תוצאה זו מציינת שריכוז הסם בדגימת השתן עולה על רמת הסף המוגדרת.

אינו תקף: לא מופיע קו ביקורת. נפח דגימה בלתי מספיק או שיטות ביצוע לקויות הן הסיבות הסבירות ביותר לאי-הופעת קו ביקורת. למדו את אופן הביצוע וחזרו על הבדיקה תוך שימוש בקלון חדש. אם הבעיה חוזרת על עצמה, הפסיקו מיד את השימוש בבדיקות מאותה אצווה ופנו למפיץ המקומי שלכם.

בקרת איכות

בקרת נהלים כלולה בבדיקה עצמה. קו אדום המופיע באזור הביקורת (C) נחשב לביקורת נהלים פנימית. הוא מצוין נפח דגימה מספיק, פעולה תקינה של הממברנה וטכניקת ביצוע נכונה.

מגבלות

מגבלות תהליך הבדיקה

• קיימת אפשרות שבדיקה זו תתן תוצאות חיוביות או שליליות שגויות.

• תוצאות בלתי-תקפות נגרמות ברוב המקרים על ידי דגימה בכמות בלתי מספיקה או עקב אי-ביצוע קפדני של ההוראות. עיינו בהוראות וחזרו על הבדיקה באמצעות ערכה חדשה. אם הבעיה חוזרת על עצמה, הפסיקו מיד את השימוש בערכה וצרו קשר עם המפיץ המקומי שלכם.

• אין להשתמש בתוצאת בדיקה חיובית לקביעת ריכוז הסם בדגימה.

• תוצאת בדיקה שלילית אינה מציינת בהכרח דגימה נטולת סמים. ייתכן וקיימים בדגימה סמים מתחת לריכוז הסף של הבדיקה, או ייתכן שהדגימה כוללת חומרים מפריעים.

• אין להשתמש בבדיקה זו כבסיס לאמצעים טיפוליים.

מאפייני ביצועים

תגובה צולבת:

בוצע מחקר לצורך קביעת התגובה הצולבת של הדגימה עם חומרים שונים, להם נוספו THC

חומרים ללא תגובה צולבת:

Acetophenetidin	Cortisone	Zomepirac	d-Pseudoephedrine
N-Acetylprocainamide	Creatinine	Ketoprofen	Quinidine
Acetylsalicylic acid	Deoxycorticosterone	Labetalol	Quinine
Aminopyrine	Dextromethorphan	Loperamide	Salicylic acid
Amoxicillin	Diclofenac	Meprobamate	Serotonin
Ampicillin	Diffunisal	Methoxyphenamine	Sulfamethazine
I-Ascorbic acid	Digoxin	Methylphenidate	Sulindac
Aspartame	Diphenhydramine	Nalidixic acid	Tetracycline
Atropine	Ethyl-p-aminobenzoate	Naproxen	Tetrahydrocortisone,
Benzilic acid	p-Estradiol	Niacinamide	3-acetate
Benzoic acid	Estrone-3-sulfate	Nifedipine	Tetrahydrocortisone
Bilirubin	Erythromycin	Norethindrone	Tetrahydrozoline
d.J-Brompheniramine	Fenoprofen	Noscapine	Thiamine
Caffeine	Furosemide	d.J-Octopamine	Thioridazine
Cannabidiol	Gentisic acid	Oxalic acid	d.J-Tyrosine
Chloral hydrate	Hemoglobin	Oxymetazoline	Tolbutamide
Chloramphenicol	Hydrochlorothiazide	Papaverine	Triamterene
Chlorothiazide	Hydrocortisone	Penicillin-G	Trifluoperazine
d.J-Chlorpheniramine	6-Hydroxyhippuric acid	Perphenazine	Trimethoprim
Chlorpromazine	3-Hydroxytyramine	Phenelzine	d.J-Tryptophan
Cholesterol	d.J-Isoproterenol	Prednisone	Uric acid
Clonidine	Isosuprine	d.J-Propanolol	Verapamil

יבואן בלעדי:

רימיפארם מוצרים רפואיים בע"מ

העמל 14 ראש העין, ת.ד. 10186 תל אביב

טל: 036483635 www.rimipharma.co.il

יצרן:

דיאלאב, אוסטריה

DIAQUICK Test to detect THC - cannabis, marijuana in a urine sample - For home use

Principle

Dialab's drug test is an extremely specific quick test to detect THC - cannabis, marijuana. The drug test is a proven testing method, used in many laboratories worldwide. The test's detection limits meet international standards. Using this test, you can detect the presence of THC in urine. Because of the test's high sensitivity, in the range of nanograms, in practice the test will detect any quantity of drug use. The drug test is not dangerous for the user when used correctly. Please follow the instructions for use of the test when carrying out the test and be aware of the fact that the urine samples tested may contain contagious materials. When testing unknown substances, the tested substance may contain substances harmful to health.

For your safety we recommend

- Read all the information in this leaflet before carrying out the test.
- Keep away from children.
- Do not eat, drink or smoke while carrying out the test.
- Do not use the test after its expiry date.
- Do not open the test bag before you are ready to begin the test.
- Do not reuse any component of the test.
- The used components of the test are to be disposed of in a garbage bin.
- Store in a dry place at a temperature of 2-30°C (36-86°F). Do not freeze.
- Do not use the test if the bag is torn or damaged.
- For external use only.
- After carrying out the test, clean well anything that has come into contact with the tested substance (and your hands).

Summary and explanation

Marijuana - THC, cannabis, hashish, grass

Marijuana is produced from the foliage of the cannabis plant and smoking is the main method of consumption. This may cause slight addiction; the symptoms, which continue for 2-4 hours, include disorientation, dizziness and psychosis. The period during which marijuana can be detected in urine is 1-14 days (in chronic users : up to 80 days).

Storage and stability

The Diaquick drug test is to be stored at a temperature of 2-30°C in the original sealed bag. The expiry date is determined in nominal laboratory conditions. The kit can be stored at room temperature or refrigerated (2-30°C). The testing stick is stable until the expiry date printed on the sealed bag. Keep the testing stick in the sealed bag until using. Do not freeze. Do not use after the expiry date.

Collecting and preparing the samples

Collect the urine samples in a clean dry container. Urine collected at any time of day can be used.

Storing the samples

The urine samples can be stored at a temperature of 2-8°C for up to 48 hours before carrying out the test.

Materials supplied

- Testing stick.
- Information leaflet.

Materials required that are not supplied

- Container for collecting urine (clean and dry).
- Clock for measuring time.

Instructions for use


Before carrying out the test let the testing stick and the urine sample reach room temperature (15-30°C).

- Bring the bag to room temperature before opening it. Remove the testing stick from the sealed bag and use it as soon as possible.
- Dip the testing stick vertically into the urine sample for 10-15 seconds, with the arrows pointing towards the urine. Do not allow the urine sample to come into contact with the area of reading the results when dipping the testing stick into the urine sample. Avoid dipping the stick

deeper than the "max" sign marked on it and avoid any contact of the urine sample with the result area.

- Place the testing stick on a flat surface, begin to measure the time and wait for the appearance of a red line or lines. Read the result after 5 minutes. The results are not to be interpreted after more than 10 minutes.

Interpreting the results

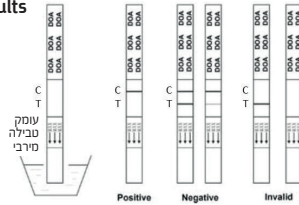

Negative: A colored line in the control area (C) and a colored line in the test area (T) for THC, is a negative result. This means that the concentration of the drug in the urine is lower than the threshold level defined for this specific drug.

* Comment: the hue of the color in the test area (T) may change, however the result will be regarded as negative even if there is a faint pink line.

Positive: A colored line in the control area (C) without a colored line in the test area (T) for THC, indicates a positive result. This result means that the concentration of the drug in the urine sample is greater than the defined threshold level.

Invalid: No control line appears. Insufficient test volume or defective testing methods are the most probable reasons for non-appearance of a control line. Learn how to carry out the test and repeat it using a new testing stick. If the problem recurs, immediately stop using the tests from the same batch and contact your local supplier.

Quality control

Control of procedures included in the test itself. A red line that appears in the control area (C) is regarded as an internal procedure control. It indicates adequate volume of the sample, correct activity of the membrane and correct testing technique.

Limitations

Limitations of the testing process
This test may give incorrect positive or negative results. Invalid results are mostly caused by an insufficient sampling quantity or by carrying out the instructions inaccurately. Read the instructions and repeat the test using a new kit. If the problem recurs, immediately stop using the tests from the same batch and contact your local supplier. Do not use a positive result to determine the concentration of the drug in the sample.


A negative test result does not necessarily mean that the sample is free of drugs. There may be drugs in the sample below the test's threshold concentration, or the sample may contain disrupting substances. Do not use this test as a basis for therapeutic means.

Operational characteristics

Cross reactions
Research has been carried out to determine cross reactions of the sample with different substances, to which THC was added.

Materials with no cross reaction:

Acetophenetidin	Cortisone	Zomepirac	d-Pseudoephedrine
N-Acetylprocainamide	Creatinine	N-Acetylprocainamide	Quinidine
Acetylsalicylic acid	Deoxycorticosterone	Acetylsalicylic acid	Quinine
Aminopyrine	Dextromethorphan	Aminopyrine	Salicylic acid
Amoxicillin	Difenhydramine	Amoxicillin	Serotonin
Amoxicillin	Ethyl-p-aminobenzoate	Amoxicillin	Sulfamethazine
I-Acetic acid	Naproxen	Diflunisal	Sulfadiazine
Aspartame	Nifedipine	Digoxin	Sulfasalazine
Atropine	Nitroglycerin	Ethyl-p-aminobenzoate	Sulfonamide
Benzic acid	Nitroglycerin	Naloxone	Tetracycline
Benzic acid	Nitroglycerin	Naloxone	Tetrahydrocortisone
Bilirubin	Nitroglycerin	Naloxone	Tetrahydrocortisone
d-Brompheniramine	Nitroglycerin	Naloxone	Tetrahydrocortisone
Caffeine	Nitroglycerin	Naloxone	Tetrahydrocortisone
Cannabidiol	Nitroglycerin	Naloxone	Tetrahydrocortisone
Chloral hydrate	Nitroglycerin	Naloxone	Tetrahydrocortisone
Chloramphenicol	Nitroglycerin	Naloxone	Tetrahydrocortisone
Chlorothalidate	Nitroglycerin	Naloxone	Tetrahydrocortisone
d-Chlorpheniramine	Nitroglycerin	Naloxone	Tetrahydrocortisone
Chlorpromazine	Nitroglycerin	Naloxone	Tetrahydrocortisone
Cholesterol	Nitroglycerin	Naloxone	Tetrahydrocortisone
Clonidine	Nitroglycerin	Naloxone	Tetrahydrocortisone

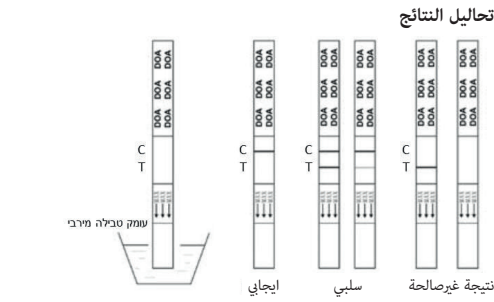

سليبي: خط ملون منطقة الكشف (C) وخط ملون منطقة الفحص (T) من أجل الكشف عن مخدر الكانبيس، فهذا يشير إلى نتيجة سلبية. هذا الأمر يدل عن وجود كمية قليلة من المخدر بعينة البول من المستوى المحدد لهذا النوع الخاص من المخدر. * ملاحظة: اللون في منطقة الفحص (T) محتمل أن يتغير، لكن النتيجة تُعتبر سلبية رغم وجود خط بلون زهري خفيف.

إيجابي: خط ملون منطقة الكشف (C) وبدون خط ملون منطقة الفحص (T) من أجل الكشف عن مخدر الكانبيس، فهذا يشير إلى نتيجة إيجابية. هذه النتيجة تدل عن وجود كمية مخدر أكثر من المستوى المحدد.

نتيجة غير صالحة: عدم وجود خط كشف. الاحتمالات لعدم وجود خط كشف قد تكون بسبب كمية عينة قليلة أو إجراء الفحص لم يتم بشكل صحيح. يجب معرفة إجراء الفحص والقيام به مجدداً بواسطة عصا فحص جديدة. في حال أن المشكلة تكررت توقف فوراً عن إجراء الفحص وتوجه إلى المزود المحلي الخاص لهذا المنتج.

ضبط الجودة: ضبط الجودة يُشمل في منتج الفحص ذاته. الخط الأحمر الذي يظهر منطقة الكشف (C) يُعتبر لمراجعة الإجراءات الداخلية. فهو يشير على وجود كمية عينة كافية، عملية صحيحة للغشاء، وإداء الإجراء بشكل صحيح.

تحديدات

تعديلات لإجراء الفحص
محمّل أن تكون نتائج سلبية أو إيجابية خاطئة من إجراء الفحص. النتائج الغير صالحة تحصل في أغلب الأحيان بسبب عدم وجود كمية كافية من العينة، أو عدم اتباع التعليمات بشكل صحيح ودقيق. في حال أن المشكلة تكررت توقف فوراً عن إجراء الفحص وتوجه إلى المزود المحلي الخاص لهذا المنتج. عدم استعمال نتيجة الفحص الإيجابية من أجل تحديد كمية المخدر في العينة. نتيجة سلبية لا تعني بالضرورة عن عينة خالية من المخدرات. محتمل تواجد كمية منخفضة من المخدرات تحت المستوى المحدد، أو محتمل أن العينة تحتوي على مواد تعرقل جودة الفحص. لا يستخدم هذا الفحص كأساس من أجل عوامل علاجية.

خصائص الإجراءات

رد فعل الاختلاط

تم بحث من أجل تحديد رد فعل الاختلاط للعينة مع مواد مختلفة، وتم إضافة ال-MDMA، لهذه المواد

في هذه القائمة اذناه اسماء المواد التي لا تحتوي على رد فعل الاختلاط مع العينة:

Acetophenetidin	Cortisone	Zomepirac	d-Pseudoephedrine
N-Acetylprocainamide	Creatinine	Ketoprofen	Quinidine
Acetylsalicylic acid	Deoxycorticosterone	Labelalol	Quinine
Aminopyrine	Dextromethorphan	Loperamide	Salicylic acid
Amoxicillin	Difenhydramine	Meprobamate	Serotonin
Amoxicillin	Ethyl-p-aminobenzoate	Methoxyphenamine	Sulfamethazine
I-Acetic acid	Naproxen	Methoxyphenamine	Sulfasalazine
Aspartame	Nifedipine	Naloxone	Sulfonamide
Atropine	Nitroglycerin	Naloxone	Tetracycline
Benzic acid	Nitroglycerin	Naloxone	Tetrahydrocortisone
Benzic acid	Nitroglycerin	Naloxone	Tetrahydrocortisone
Bilirubin	Nitroglycerin	Naloxone	Tetrahydrocortisone
d-Brompheniramine	Nitroglycerin	Naloxone	Tetrahydrocortisone
Caffeine	Nitroglycerin	Naloxone	Tetrahydrocortisone
Cannabidiol	Nitroglycerin	Naloxone	Tetrahydrocortisone
Chloral hydrate	Nitroglycerin	Naloxone	Tetrahydrocortisone
Chloramphenicol	Nitroglycerin	Naloxone	Tetrahydrocortisone
Chlorothalidate	Nitroglycerin	Naloxone	Tetrahydrocortisone
d-Chlorpheniramine	Nitroglycerin	Naloxone	Tetrahydrocortisone
Chlorpromazine	Nitroglycerin	Naloxone	Tetrahydrocortisone
Cholesterol	Nitroglycerin	Naloxone	Tetrahydrocortisone
Clonidine	Nitroglycerin	Naloxone	Tetrahydrocortisone

المبدأ من الفحص
منتج فحص المخدرات من شركة DIALAB هو عبارة عن إجراء فحص سريع ومحدد بالأخص للكشف عن وجود ال- قنب الهندي - والمريخوانا، الفحص عن وجود مخدرات هي أسلوب فحص موثوق منه ويستخدم هذا الفحص في عدة مختبرات في العالم. وتحديدات هذا النوع من الفحص يطابق المعايير العالمية. بواسطة هذا الفحص يمكن الكشف عن وجود MDMa في البول. بسبب الدقة العالية للفحص على مستوى النانوجرام، وفي الواقع فإن الفحص يستطيع الكشف عن كل كمية مخدرات مستهلكة. فحص المخدرات لا يعتبر خطر عن من يستخدم استخدام صحيح. يرجى اتباع التعليمات أثناء إجراء الفحص، ويجب العلم بأن عينات البول التي سيتم فحصها قد تحتوي على مواد معدنية. أثناء إجراء فحص لمواد غير معروفة من الممكن أن تحتوي هذه المادة على عوامل مفسدة للصحة.

من أجل الحفاظ على سلامتكم نحن نوصي على استخدام المنتج كالتالي

- يجب قراءة جميع المعلومات في المكتوبة قبل إجراء الفحص
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- عدم الأكل، الشرب، أو التدخين أثناء إجراء الفحص.
- عدم استخدام منتج الفحص بعد انتهاء تاريخ صلاحيته.
- عدم فتح زرمة الفحص قبل أن تكونوا على استعداد لإجراء الفحص.
- عدم استخدام أي أداة من أدوات الفحص مرة أخرى.
- يجب القاء أدوات الفحص المستعملة في القمامة.
- يجب الحفاظ على المنتج بمكان جاف تتراوح به درجة الحرارة بين 2-30°C أو 36-86°F.
- وعدم تصعيد المنتج.
- عدم استخدام المنتج في حال كانت الزرمة تالفة أو ممزقة.
- فقط الاستخدام الخارجي.
- بعد الانتهاء من الفحص يجب تنظيف كل جزء قد تلامس مع المادة المفحوصة (وايضاً الأيدي).

ملخص وشرح

مريخوانا - THC، قنب هندي، حشيش مُخدّر
تنتج المريخوانا من إزهار نبتة القنب الهندي، الاستخدام الدارج هو بواسطة التدخين. الأمر قد يؤدي إلى ادمان بسيط، أعراض استخدام هذا المخدر قد تمتد إلى فترة من ساعتين إلى 4 ساعات، والأعراض قد تكون الشعور بعدم معرفة أين تتواجد، دوخة، هذيان. الفترة الزمنية التي يمكن اكتشاف عن وجود مريخوانا في البول هي من يوم واحد إلى 14 يوم (وعند المستهلكين المدمنين : حتى 80 يوم).

الغزن ومدة الصلاحية

يجب تخزين منتج فحص المخدرات لشر كةDIAQUICK في درجة حرارة تتراوح بين 2-30°C ويجب أن يبقى في غلافه الأصلي ويجب أن يكون مغلق بشكل جيد. تاريخ صلاحية المنتج المطبوع يحدد بشروط مختبر ضليحة. ممكن خزن المنتج بدرجة حرارة الغرفة أو في مكان مبرد تتراوح درجة الحرارة به بين (2-30°C). عصا الفحص قائم الاستعمال حتى تاريخ الصلاحية المطبوع على غلاف المنتج الخلق. يجب الحفاظ على عصا الفحص في الغلاف حتى إجراء الفحص. ممنوع تصعيد المنتج. وممنوع استخدام المنتج بعد انتهاء صلاحيته.

جمع العينات وتجهيزهم

يجب أخذ عينة من البول بوعاء جاف ونظيف. ممكن استخدام عينات من البول التي أخذت بكل ساعة من اليوم.

خزن العينات

ممكن خزن عينات البول في درجة حرارة تتراوح بين 2-8°C وحتى 48 ساعة قبل إجراء الفحص.

المواد المُرودة مع المنتج

- عصا فحص.
- دليل الاستخدام.

المواد المطلوبة الغير مُرودة مع المنتج

- وعاء لجمع البول (جاف ونظيف).
- ساعة لتحديد الوقت.

تعليمات الاستخدام

قبل إجراء الفحص يجب أن يصل عصا الفحص وعينة البول إلى درجة حرارة الغرفة (15-30°C).

- يجب أن تكون زرمة المنتج متناسقة مع درجة حرارة الغرفة قبل فتحها. اخرج عصا الفحص من الغلاف الخلق واستعمله بأسرع ما يمكن.
- أغمر عصا الفحص بشكل عمودي بعينة البول لمدة 10-15 ثانية، تأكد أن الاسم الموجودة على العصا نحو عينة البول. يجب عدم تلامس عينة البول مع منطقة قراءة النتائج أثناء غمر عصا الفحص في عينة البول. انتبه على عدم غمر العصا أكثر من إشارة "max" الموجودة على العصا. وعدم تلامس بين عينة البول ومنطقة قراءة النتائج.
- قم بوضع عصا الفحص على مسطح مستقيم، وإبدأ في تحديد وقت حتى ظهور خط/ خطوط بلون أحمر. قم بقراءة النتائج بعد 5 دقائق. وعدم قراءة النتائج بعد 10 دقائق.